


STEP 1

お湯に浸漬




STEP 2

その場で形を調整

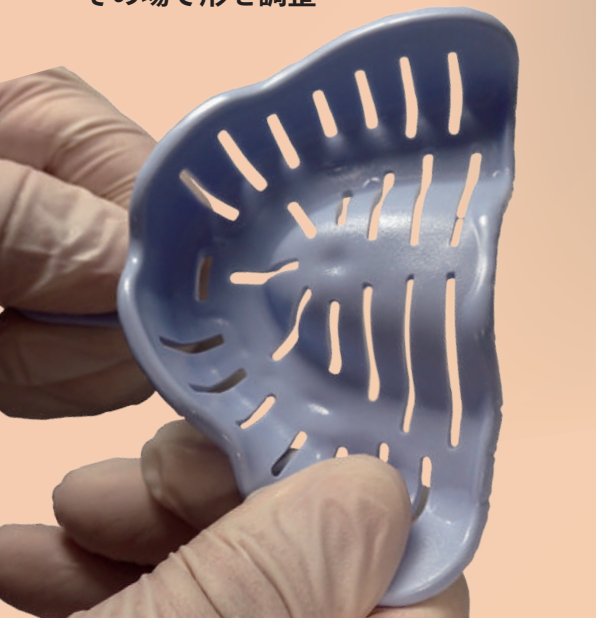

STEP 3

トランスフォーム完成

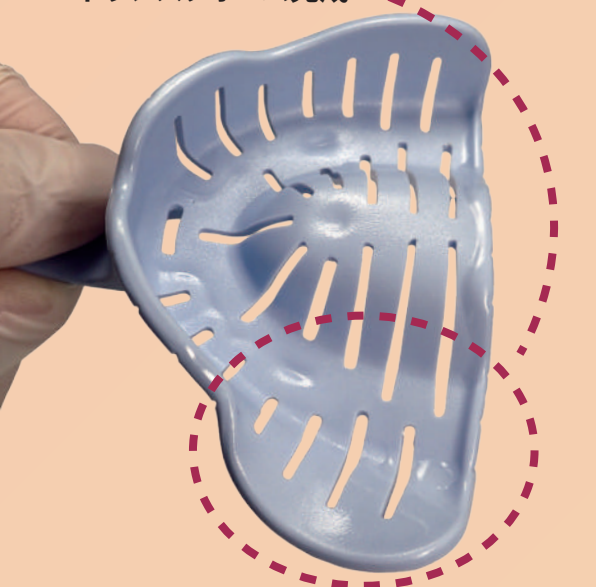

新年にカラフルな変形トレーを

特別価格

でご提供

2019.12.21 ▶ 2020.02.20

 **TransForm**TM
HEAT MOULDABLE IMPRESSION TRAYS
トランスフォームトレー

トレーの形
自由自在



製品動画はこちら

医療機器の分類：一般医療機器
一般的名称：歯科印象採得用トレー
販売名：Astek トランスフォームトレー
届出番号：27B2X00091000069

単回使用

お湯で形を変えられる

70℃以上のお湯に 20 秒間漬けるだけ
浸漬時間を調整すればポットのお湯でも使えます
お湯で変形させた後に流水で冷やせばトレーに硬さが戻ります

※ 歯列不正の印象が簡単に
※ 骨隆起にも対応

気軽に使える価格

1 個当たり約 108 円
しかも変形するので多くのトレーを用意せずに済みます

圧接しやすいデザイン

印象材を圧接しやすいようにフィンガーパッドを付与
維持溝は撤去時の歪みを防止します

有歯顎用

特別
価格



#1 下顎ラージ



#3 下顎ミディアム



#5 下顎スモール




#2 上顎ラージ



#4 上顎ミディアム



#6 上顎スモール

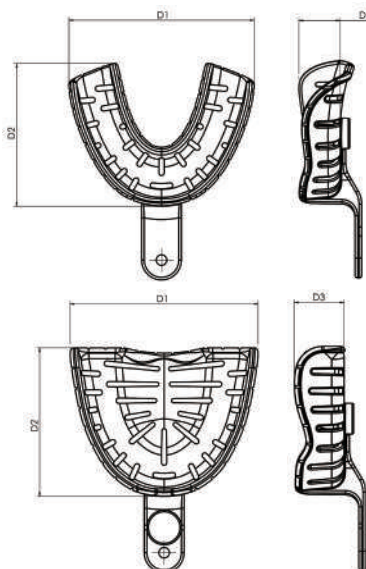

単位：mm

番号	D1	D2	D3
#1 (紫)	74	60	16
#2 (紫)	79	60	21
#3 (青)	70	54	15
#4 (青)	71	56	18
#5 (緑)	66	50	14
#6 (緑)	66	49	20
アソート	各規格 2 入		

単回使用

写真、イラストともに実物大ではありません

標準医院価格：12 個入 / ~~1,300~~ 円

無歯顎用

特別
価格



#7 下顎ラージ



#9 下顎ミディアム



#11 下顎スモール




#8 上顎ラージ



#10 上顎ミディアム



#12 上顎スモール

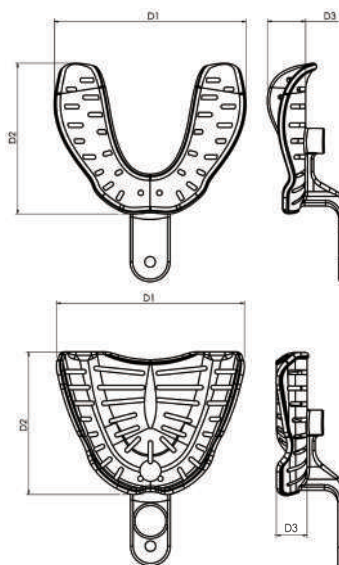

単位：mm

番号	D1	D2	D3
#7 (紫)	76	60	17
#8 (紫)	76	59	13
#9 (青)	72	57	14
#10 (青)	71	54	12
#11 (緑)	64	53	13
#12 (緑)	65	49	10
アソート	各規格 2 入		

単回使用

写真、イラストともに実物大ではありません

標準医院価格：12 個入 / ~~1,300~~ 円



製造販売元

株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL 06-6773-3333 (代)
東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL 03-3835-2653 (代)
九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL 092-575-6060 (代)
URL: <http://www.momose-dm.co.jp/>

お問い合わせは