



Quality Products
Made in Germany



超 速 撤 去 !!

金パラ
合金を切り裂く!

カーバイドバー **H34**

ジルコニアを
切り裂く!

ダイヤモンドバー **4ZR**

メタル
ポーセレンを
同時に切り裂く!

カーバイドバー **H4MC**

サクッと削れる
リムーバルバーを
特別価格で
ご提供

2021. 1/21~
2/20

ダイヤモンドバー
4ZR

がっちり固めたダイヤモンド粒子が
わずかな時間で
ジルコニアを切り裂く!

カーバイドバー
H34

タフなネックと鋭利なブレードが
わずかな時間で
金パラ合金を切り裂く!

カーバイドバー
H4MC


ピラミッドシェイプブレードが
これ1本で
メタル・ポーセレンを同時に切り裂く!



ジルコニア



パラジウム

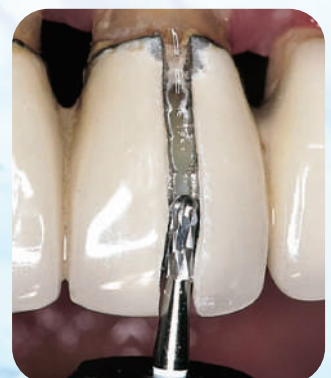

前装冠

特別
価格

ジルコニア用 ZRダイヤモンドバー FG

撤去や咬合調整を効率化させるジルコニア用コーティング



品番(ティール)	4ZRS-016	4ZR-012	4ZR-014
作業長(mm)	4.0	8.0	8.0
最大径(mm)	1.6	1.2	1.4
全長(mm)	19.0	22.0	
価格(1入)	1,500円		
価格(5入)	7,500円		

品番(ティール)	4ZR キット
価格	4,500円
総入数	3本
プラスチックケース	滅菌不可
内容(各1本入)	4ZRS-016, 4ZR-012, 4ZR-014



クラウンの分割
4ZRS-016



ブリッジの切断
4ZR-012




クラウンを全周に
亘って削るケース
4ZR-014

ジルコニア用ダイヤコーティング

3層コーティングの上にさらに特別層を設けています。通常のコーティングを施した製品よりもダイヤ粒子が脱離しにくいので長期間ご使用頂けます。

ZR ダイヤボンディング層断面図

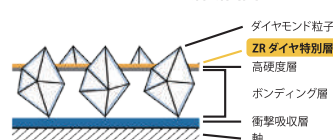

Shank: FG/適正回転数: 毎分16万回転/最高回転数: 毎分45万回転

医療機器の分類: 一般医療機器 販売名: コメット ダイヤモンドバー
一般的名称: 歯科用ダイヤモンドバー 届出番号: 27B2X00091000001

特別
価格

メタルクラウン撤去用カーバイドバー FG

金パラを素早く滑らかに切削 クラウンカッター H34

増量
キャンペーンも
準備中
(2/22~実施予定)



品番	H34-010	H34-012
作業長(mm)	2.0	2.0
最大径(mm)	1.0	1.2
最高回転数(毎分)	45万	

Shank: FG/全長: 20mm/入数: 5本入/適正回転数: 毎分16万/価格: ¥5,000

医療機器の分類: 一般医療機器 販売名: コメット カーバイドバー
一般的名称: 歯科用カーバイドバー 届出番号: 27B2X00091000002


切れ味を高めるブレードデザイン

ラージブレード&ディープクロスカットでメタルクラウンを素早く撤去。



太いネックが破折を防ぐ

FG#330と比べると約2倍の太さで破折しにくくなっています。

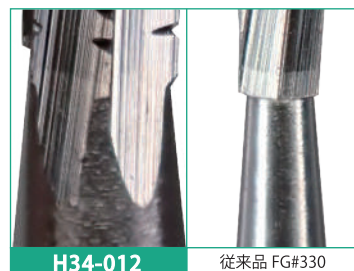

特別
価格

メタルボンド・レジン前装冠撤去用カーバイドバー FG

ポーセレン・レジン・メタルを同時に削る H4MC




品番	H4MC-012	H4MCL-012	H4MCXL-014	H4MCXXL-014
作業長(mm)	2.0	3.5	5.0	8.0
最大径(mm)	1.2	1.2	1.4	1.4
全長(mm)	20.0	20.0	20.0	23.0
最高回転数(毎分)	45万			30万


Shank: FG/入数: 5本入/適正回転数: 毎分16万/価格: ¥5,500

医療機器の分類: 一般医療機器 販売名: コメット カーバイドバー
一般的名称: 歯科用カーバイドバー 届出番号: 27B2X00091000002

チッピングしにくいブレード設計で優れた切削能力と持続性を実現しました

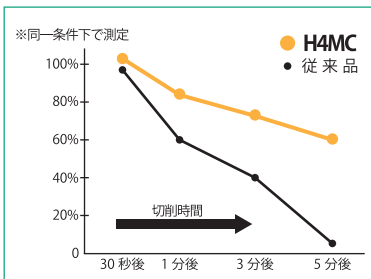

破折を防止するためにネックは太く、ピラミッドシェイプブレードで欠けを防止します

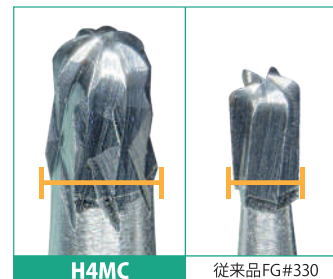

製造販売元

株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6-35

TEL 06-6773-3333 (代)

<http://www.momose-dm.co.jp/>

株式会社モモセ歯科商会

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2

TEL 03-3835-2653 (代)

九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21

TEL 092-575-6060 (代)

お問い合わせは