



コメット 技工キャンペーン ラボ向け

# LOVE

# THE JOB! 2023

5/22~10/20



# 100

years  
of preparation  
for tomorrow





Quality Products  
Made in Germany












# ポリッシャー 早見表

※イラストは実物大ではありません

## メタル

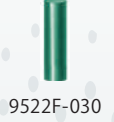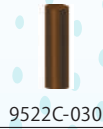

## ノンプレシャスメタル (チタンを含む)

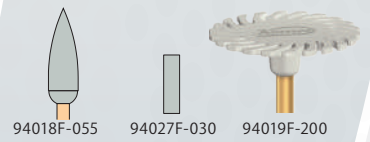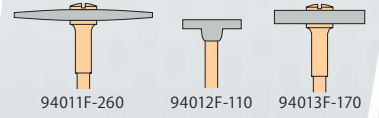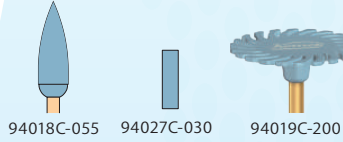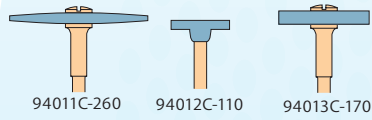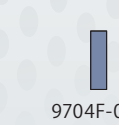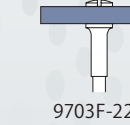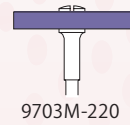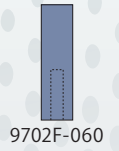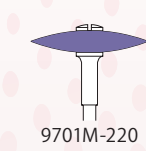


## 陶材 (ジルコニア ニケイ酸リチウムを含む)

粗 ← → 細

# グラインダー 早見表

※イラストは実物大ではありません

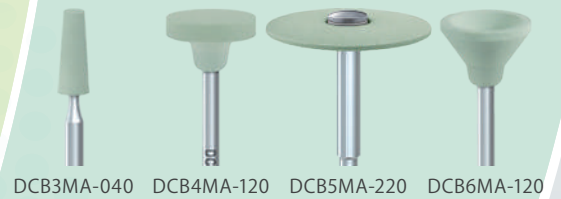


## 陶材 (ジルコニア ニケイ酸リチウムを含む)

コーラス  
粗 ← → ミディアム 細

# ダイヤモンドジスク 早見表


イラストはほぼ実物大です  
単位 (mm)

P.7  
プラスタージスク

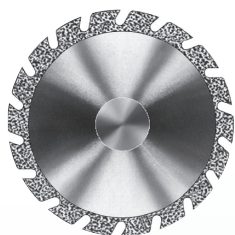


#8964-300

P.7  
ダイヤモンドジスク

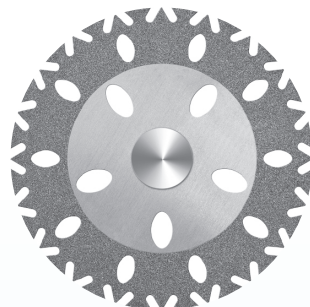


#987P-400

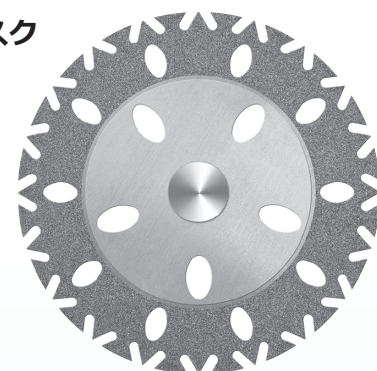

#987P-480

石膏

P.6  
Vカットジスク

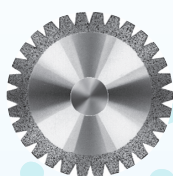

#946-220

P.7  
トルネードジスク




#936-220

レジン  
(柔らかめ)


石膏・レジン・陶材  
(硬め)

P.6  
オーバルジスク

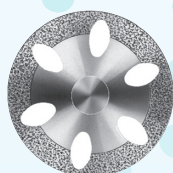

#911HP-220

P.7  
メッシュジスク

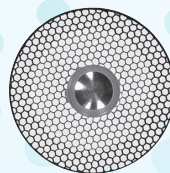

#934-220


P.7  
ミニフレックスジスク




#943-065 #943-080

陶材・レジン  
(柔らかめ)

P.6  
ダイヤモンドジスク

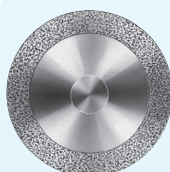


#911H-220

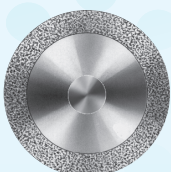

#911HV-220

P.6  
2グリットジスク

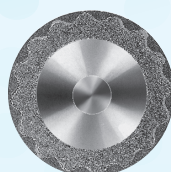

#984-220


P.6  
スパイラルジスク




#983-220

陶材  
(柔らかめ)


P.6  
ダイヤモンドジスク

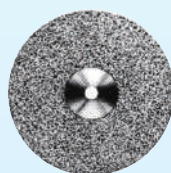


#918-220

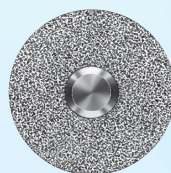


#918B-220

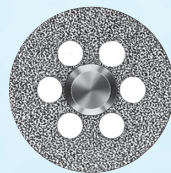

#918PB-220

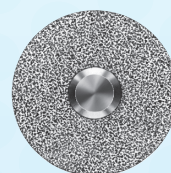

#919-220

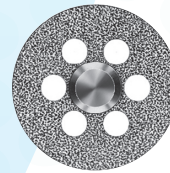

#919P-220

陶材  
(硬め)

P.6  
シンタードダイヤモンドジスク



#942-140



#942-200



#6942-200

ジルコニア  
コバルト

## マルチセラミック・グラインダー


減磨しにくいセラミック製作業部

発熱を抑える多孔質形状

滑らかな研削面

コメット マルチセラミック・グラインダー  
届出番号: 27B2X0009100061 一般医療機器 歯科技工用ダイヤモンド研削材

### コーズ




1入

品番	DCB1CA-025	DCB2CA-065	DCB3CA-040	DCB4CA-120	DCB7CA-220	DCB8CA-035	DCB9CA-050
作業長/厚み	7.0	13.0	11.0	2.5	3.0	10.0	3.5
最大径	2.5	6.5	4.0	12.0	22.0	3.5	5.0
最高回転数	35,000	30,000	35,000	25,000	25,000	35,000	35,000
価格	4,300円	5,400円	4,800円	6,700円	10,200円	4,800円	4,800円

推奨回転数: 毎分12,000回転



### ミディアム



1入

品番	DCB1MA-025	DCB2MA-048	DCB2MA-065	DCB3MA-040	DCB4MA-120	DCB5MA-220	DCB6MA-120
作業長/厚み	7.0	13.0	13.0	11	2.5	2.0	6.8
最大径	2.5	4.8	6.5	4.0	12.0	22.0	12.0
適正回転数	35,000	30,000	30,000	35,000	25,000	25,000	25,000
価格	4,300円	4,800円	5,400円	4,800円	6,700円	7,600円	7,600円

推奨回転数: 毎分12,000回転




## マルチセラミック・ポリッシャー

ジルコニアやニケイ酸リチウム、陶材などの研磨が僅か2ステップ

ゴールドシャンクで簡単識別、プレポリッシュ (ブルー)・ハイシャインポリッシュ (グレー)

コメット マルチセラミック・ポリッシャー  
届出番号: 27B2X0009100059 一般医療機器 歯科技工用ダイヤモンド研削材

### 中研磨

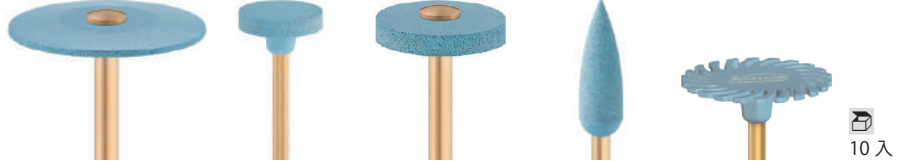


1入

品番	#94011C-260	#94012C-110	#94013C-170	#94018C-055	#94019C-200	#94027C-030	#94027用 マンドレル
作業長/厚み	2.0	2.5	2.5	17.5	1.0	11.0	#329A
最大径	26.0	11.0	17.0	5.5	20.0	3.0	5.0
シャンク	HP	HP	HP	HP	HP	—	—
価格	7,200円	2,600円	4,600円	2,600円	6,400円	2,600円 (10入り)	1,000円

※94027シリーズには必ず専用マンドレル329Aをご使用ください

### 仕上研磨



1入

品番	#94011F-260	#94012F-110	#94013F-170	#94018F-055	#94019F-200	#94027F-030
作業長/厚み	2.0	2.5	2.5	17.5	1.0	11.0
最大径	26.0	11.0	17.0	5.5	20.0	3.0
シャンク	HP	HP	HP	HP	HP	—
価格	7,200円	2,600円	4,600円	2,600円	6,400円	2,600円 (10入り)

※94027シリーズは  
先端を付け替え可能  
裂溝の研磨におすすめです

適用材料: ジルコニア、アルミナ、プレスセラミック、陶材  
適正回転数: 毎分 6000 回転



## NEM ポリッシャー (ダイヤモンド粒子配合)


適用材料：ノンプレシャスメタル (チタンを含む)

### キズ取りの時間を短縮 - 中研磨 -

カーボラダムやカーバイドバー等での面ならし後にお使いください  
面ならし後のキズ取りが素早く行えるように研磨材とシリコンの硬さを  
ノンプレシャス用に調整しています  
中研磨の段階ですでに表面に光沢が出はじめていることが確認できます  
症例によってはこのまま最終の艶出し研磨工程に移行いただくことも十分可能です



当社従来品

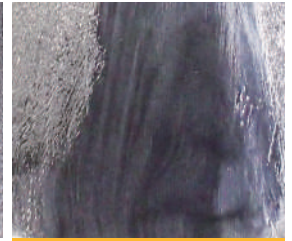


本品による中研磨後


※同一条件下での社内検証結果

### 鏡面研磨までわずか2ステップ - 仕上げ研磨 -

単純な平面 (PFM クラウンの舌面など) にはこの仕上げ用ポイントだけで鏡面研磨が可能です  
また咬合面や複雑な歯冠部の曲線等にはこの仕上げ用ポイントを事前に使用することで  
艶出し研磨工程に用いる研磨材の使用量軽減にもつながります

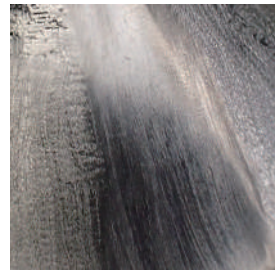

当社従来品

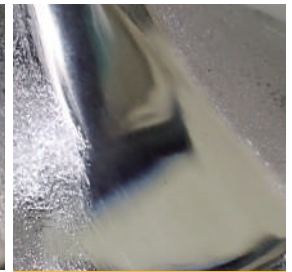

本品による仕上げ研磨後

※同一条件下での社内検証結果

### チェアサイドでも使いやすい

ルーージュ等の研磨材 (油分) で技工物を汚さないで研磨後のセットがスムーズに行えます

#### 中研磨

#### 仕上げ研磨

品番	#9701M-220	#9702M-060	#9703M-220	#9704M-030	#9701F-220	#9702F-060	#9703F-220	#9704F-030	品番	#329	品番	#329A
粒度	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ファイン	ファイン	ファイン	ファイン	ネジの長さ	12.0	ネジの長さ	5.0
作業長/厚み	4.0	22.0	3.0	11.0	4.0	22.0	3.0	11.0	最大径	-	最大径	-
最大径	22.0	6.0	22.0	3.0	22.0	6.0	22.0	3.0	全長	44.0	全長	44.0
適正回転数	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	適正回転数	6,000	適正回転数	6,000
価格	7,800円	6,600円	7,800円	2,300円	7,800円	6,600円	7,800円	2,300円	価格	3,100円	価格	1,000円

※9704シリーズには必ず専用マンドレル329Aをご使用ください

# メタル研磨用ポリッシャー HP

ピンポリッシャー、専用マンドレルのイラストはほぼ実物大です  
単位 (mm)

## ピンポリッシャー

### 補綴物までの距離が短く、高い操作性

スリーブが邪魔になりません

### タワミと脱離を予防するスクリュー式

ポイントの根本までしっかり使えます



ピンポリッシャー

自社従来品

製品動画は  
こちら



写真ご提供：奥野 幾久 先生 (奥野歯科医院, 大阪府大阪市)



ドレッシング

中研磨

仕上げ研磨

ポイント  
10入



専用  
マンドレル  
1入



キット



品番	#9522C-030	#9522M-030	#9522F-030	品番	#329A	品番	#SD1873
粒度	コアース	ミディアム	ファイン	ネジの長さ	5.0	内容	#9522C-030 (10本) #9522M-030 (10本) #9522F-030 (10本) #329A (3本)
最大径	3.0	3.0	3.0	最大径	-		
全長	11.0	11.0	11.0	全長	44.0		
適正回転数	6,000	6,000	6,000	適正回転数	6,000		
価格	1,400円	1,400円	1,400円	価格	1,000円	価格	5,400円

## ダイヤモンドドレッサー

薬事法適用外品




1入 ※実物大ではありません  
#16 10,800円  
II (#593) 21,000円

## レジン用 (柔らかめ)

### V カットジスク

レジンで目詰まりしないディスク形状  
プロビジョナルの分割やスブルーカットに

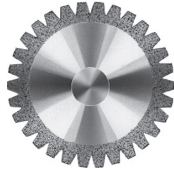




📦 1入

品番	#946-220
粒度	エキストラファイン (25μm)
直径	22.0
厚み	0.2
付着面	両面
適正回転数	15,000
価格	3,600円

## 陶材用 (柔らかめ)

### ダイヤモンドジスク

### 2 グリットジスク

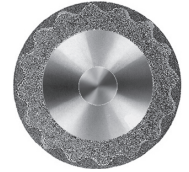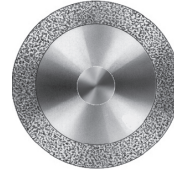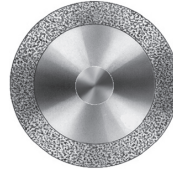


📦 1入

品番	#911H-220	#911HV-220	#984-220
粒度	ミディアム (107μm)	ミディアム (107μm)	外: ファイン (46μm) 内: ミディアム (107μm)
直径	22.0	22.0	22.0
厚み	0.15	0.1	外: 0.15・内: 0.25
付着面	両面	上面	両面
適正回転数	15,000	15,000	15,000
価格	6,000円	3,600円	6,000円

## 陶材&レジン用 (柔らかめ)

### オーバルジスク



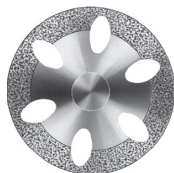


📦 1入

品番	#911HP-220
粒度	ミディアム (107μm)
直径	22.0
厚み	0.15
付着面	両面
適正回転数	15,000
価格	6,000円

## 陶材用 (硬め)

### ダイヤモンドジスク

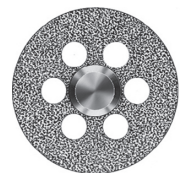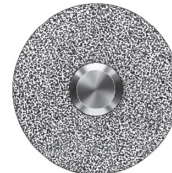
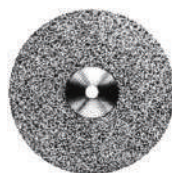


📦 1入

品番	#918-220	#918B-220	#918PB-220
粒度	ミディアム (107μm)	ミディアム (107μm)	ミディアム (107μm)
直径	22.0	22.0	22.0
厚み	0.2	0.3	0.3
付着面	上面	両面	両面
適正回転数	15,000	15,000	15,000
価格	3,600円	6,500円	6,500円

## 陶材用 (硬め)

### ダイヤモンドジスク

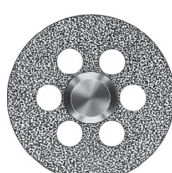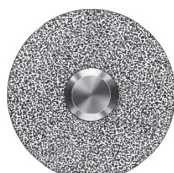

📦 1入

品番	#919-220	#919P-220
粒度	ミディアム (107μm)	ミディアム (107μm)
直径	22.0	22.0
厚み	0.2	0.2
付着面	下面	下面
適正回転数	15,000	15,000
価格	3,600円	3,600円

## ジルコニア・コバルトの切削

### シンタードダイヤモンドジスク



📦 1入


品番	#942-140	#942-200	#6942-200
粒度	ミディアム (107μm)	ミディアム (107μm)	コース (151μm)
直径	14.0	20.0	20.0
厚み	0.17	0.17	0.17
ダイヤモンド粒子	外周全体	外周全体	外周全体
適正回転数	25,000	15,000	15,000
価格	7,200円	10,200円	10,200円

コメント ダイヤモンドジスク  
届出番号: 27B2X00091000009  
一般医療機器 歯科技工用ダイヤモンド研削材

## 陶材・レジン用 (柔らかめ)


### メッシュジスク

フレキシブルなハニカムデザイン  
陶材やレジンの微細な輪郭を再現  
※ジルコニア・ニケイ酸リチウムは除く

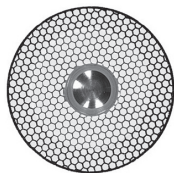

1入

品番	#934-220
粒度	ウルトラファイン (8μm)
直径	22.0
厚み	0.18
付着面	両面
適正回転数	15,000
価格	6,500円

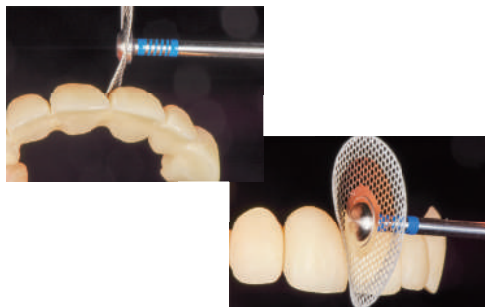

臨床歯科で欠かすことのできないプロビジョナルレストレーション。  
切縁の細かな調整・エンブレジャーの調整・緩やかな湾曲の付与など、  
私にとってこのダイヤモンドジスクは美しいプロビジョナル  
レストレーション製作に欠かせないツールとなっています。

写真と資料ご提供: 高井 基普 先生  
(プレミアムデンタルケア 恵比寿 代官山, 東京都渋谷区)

## 陶材・レジン・石膏用 (硬め)

### トルネードジスク

陶材・レジン・石膏の分割と  
大まかな形態修正が行える万能型ジスク



1入

品番	#936-220
粒度	ミディアム (107μm)
直径	22.0
厚み	0.25
付着面	両面
適正回転数	15,000
価格	6,000円

## 陶材&レジン用 (柔らかめ)

### ミニフレックスジスク

小さな径と薄い作業部厚で陶材を  
精密・正確に分割できます



1入

品番	#943-065	#943-080
粒度	ミディアム (107μm)	ミディアム (107μm)
直径	6.5	8.0
厚み	0.15	0.15
付着面	両面	両面
適正回転数	25,000	25,000
価格	2,600円	2,600円

## 陶材用 (柔らかめ)

### スパイラルジスク

厚さ 0.1mmの極薄ジスク  
スリット入りで反対側もしっかり見えます




1入

品番	#983-220
粒度	ウルトラファイン (8μm)
直径	22.0
厚み	0.1
付着面	両面
適正回転数	15,000
価格	6,000円

## 石膏用 (硬め)

### プラスタージスク

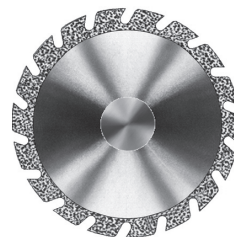

1入


品番	#8964-300
粒度	ファイン (46μm)
直径	30.0 (コーティング幅3.0)
厚み	0.3
付着面	両面
適正回転数	10,000
価格	7,200円

## 石膏・埋没材用 (硬め)

### ダイヤモンドジスク

作業部径が大きいので分割時に段差ができません  
パンチングしているので反対側もしっかり見えます

製品動画は  
こちら

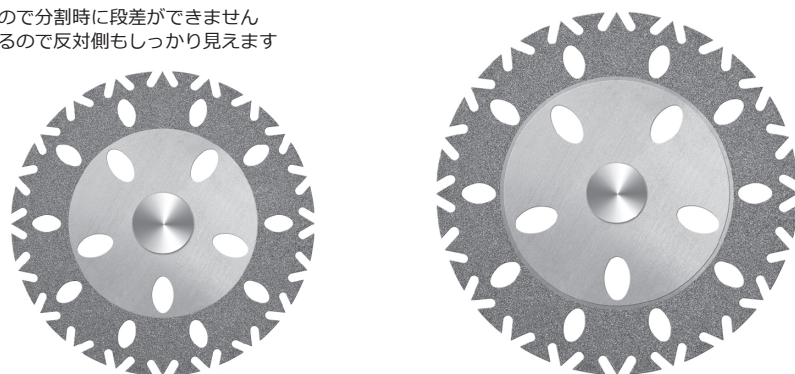

1入

品番	#987P-400	#987P-480
粒度	ミディアム (107μm)	ミディアム (107μm)
直径	40.0 (コーティング幅7.5)	48.0 (コーティング幅9.0)
厚み	0.33	0.33
付着面	両面	両面
適正回転数	10,000	10,000
価格	8,200円	10,800円

正回転・逆回転で使用可能  
左利きの方も OK



埋没材の分割



石膏模型の分割




# ジルコニア用ダイヤモンドバー FG


長寿命

3層コーティングの上にさらに**特別層**を設けているのでジルコニアを削ってもダイヤモンド粒子が簡単に脱離しません

## ZR ダイヤボンディング層断面図

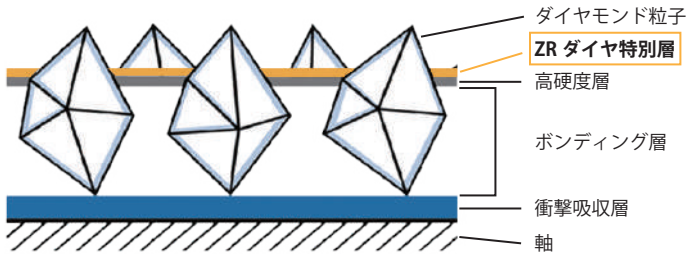

一般的なダイヤモンドボンディング層断面図 (ダイヤモンド粒子が脱離しやすい)

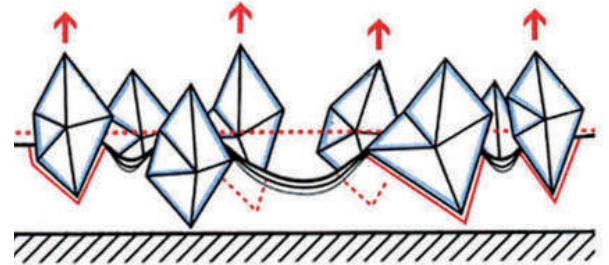

## 撤去 FG

部位ごとに使いやすい形態を揃えているのでジルコニアの撤去を効率的に行えます  
全形態の入ったキットもございます

## チェアサイドに お勧め



品番(アイテム)	4ZRS 016	4ZR 012	4ZR 014
作業長(mm)	4.0	8.0	8.0
最大径(mm)	1.6	1.2	1.4
全長(mm)	19.0	22.0	
価格(1入)	1,800円		
価格(5入)	9,000円		

品番(アイテム)	4ZRキット
内容(各1本)	4ZRS-016 4ZR-012 4ZR-014
プラスチック製ケース	滅菌不可
価格(3入)	5,400円


適正回転数：毎分 16 万回転

最高回転数：毎分 45 万回転

クラウンの分割  
4ZRS-016



ブリッジの切断  
4ZR-012

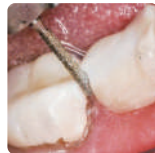


クラウンを全周に  
亘って削るケース  
4ZR-014



## 穿通 FG

切れ味が高いコーラストイプの粒子  
ジルコニアの穿通が容易に行えるので根管治療時にお使いいただけます

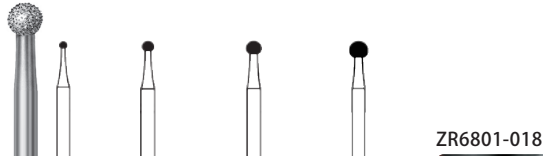

品番(アイテム)	ZR6801 010	ZR6801 014	ZR6801 018	ZR6801 023
最大径(mm)	1.0	1.4	1.8	2.3
価格(1入)	1,400円			
価格(5入)	7,200円			

ZR6801-018



適正回転数：毎分 16 万回転 最高回転数：毎分 45 万回転 全長：19mm

※発熱防止のためドライタービンではご使用いただけません

## 切端形態付与及び 連結部調整 FG



品番(アイテム)	ZR6850 016	ZR6862 016	-
品番(アイテム)	ZR850 016	ZR862 016	ZR863 014
品番(アイテム)	ZR8850 016	ZR8862 016	ZR8863 014
作業長(mm)	10.0	8.0	10.0
最大径(mm)	1.6	1.6	1.4
全長(mm)	22.0	21.0	24.0
テーパ	2.0	-	-
価格(1入)	1,800円		
価格(5入)	9,000円		

適正回転数：毎分 16 万回転 最高回転数：毎分 45 万回転

## 咬合調整 FG

ファインタイプは調整後に面が荒れないので  
研磨しやすい面に仕上がります



品番(アイテム)	ZR6379 014	ZR6379 023	-
品番(アイテム)	ZR379 014	ZR379 023	ZR972 020
品番(アイテム)	ZR8379 014	ZR8379 023	ZR8972 020
作業長(mm)	2.8	4.2	4.0
最大径(mm)	1.4	2.3	2.0
全長(mm)	19.0		21.0
価格(1入)	1,400円		
価格(5入)	7,200円		

ZR8379-014




資料ご提供：  
脇 宗弘 先生  
(脳歯科医院、  
大阪市阿倍野区)

適正回転数：毎分 16 万回転 最高回転数：毎分 45 万回転  
(023 サイズのみ毎分 30 万回転)




## 高切削力

通常タイプのダイヤモンドバーと比べて  
均一化した**ダイヤ粒子**の数を更に**増やす**ことで  
切削効率を高めています

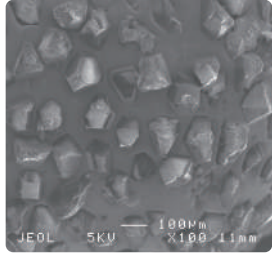

4ZR-014

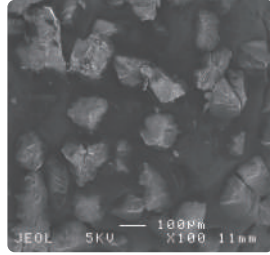


881-014 (通常品)

## ロングネック

**ロングタイプ**は視認性が良く  
前歯クラウンの**切端内面**でも簡単に調整可能です



ZR8379L-014 で歯冠長の長いクラウンの内面調整

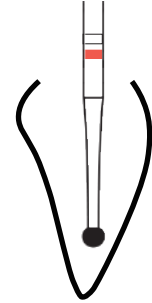

コメント ダイヤモンドバー  
届出番号: 27B2X00091000001  
一般医療機器 歯科用ダイヤモンドバー

## サポート除去及びコーピング調整 FG

コアスタイプはジルコニアを効率的に削ることができます




品番 (コア)	ZR6830L 014	ZR6881 012	ZR6881 016	ZR6856 025
品番 (フェイス)	-	-	-	ZR8856 025
作業長(mm)	5.0	8.0	8.0	8.0
最大径(mm)	1.4	1.2	1.6	2.5
全長(mm)	19.0	22.0		21.0
最高回転数 (毎分)	45万			30万
価格(1入)	1,400円		1,800円	
価格(5入)	7,200円		9,000円	

コーピング修正  
ZR6856-025



サポート除去  
ZR6856-025

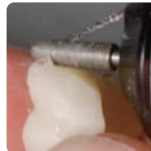

資料ご提供:  
松田 信介 先生  
(Matsuda Oral  
Appliance,  
大阪市平野区)

適正回転数: 毎分 16 万回転

## 裂溝付与 FG

エッジを尖らせたコアスタイプは  
裂溝を付与しやすくなっています



品番 (コア)	ZR6390 016	ZR6805 018	ZR6807 016
品番 (フェイス)	ZR8390 016	-	-
作業長(mm)	3.5	1.6	4.0
最大径(mm)	1.6	1.8	1.6
全長(mm)	19.0		20.0
価格(1入)	1,400円		
価格(5入)	7,200円		

裂溝付与  
ZR6390-016





資料ご提供:  
松田 信介 先生  
(Matsuda Oral  
Appliance,  
大阪市平野区)

適正回転数: 毎分 16 万回転 最高回転数: 毎分 45 万回転

## コーピング内面調整及びアクセスホール調整 FG ロング

全長は 26mm  
前歯クラウンの切端  
内面にも届きます

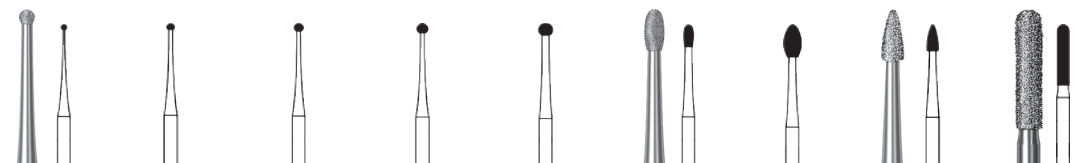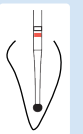


品番 (コア)	-	-	-	ZR801L 014	ZR6801L 018	-	-	-	-
品番 (フェイス)	-	-	ZR801L 012	ZR801L 014	-	ZR379L 014	-	ZR390L 014	-
品番 (フェイス)	ZR8801L 008	ZR8801L 010	-	ZR8801L 014	ZR8801L 018	ZR8379L 014	ZR8379L 023	ZR8390L 014	ZR8881 016
作業長(mm)	-	-	-	-	-	2.9	4.3	3.4	8.0
最大径(mm)	0.8	1.0	1.2	1.4	1.8	1.4	2.3	1.4	1.6
価格(1入)	1,400円								1,800円
価格(5入)	7,200円								9,000円

コーピング  
内面調整  
ZR8801L




コーピング  
内面調整  
ZR8379L-014

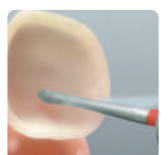

適正回転数: 毎分 16 万回転 最高回転数: 毎分 30 万回転 全長: 26mm

# プロビテック カーバイドカッター HP

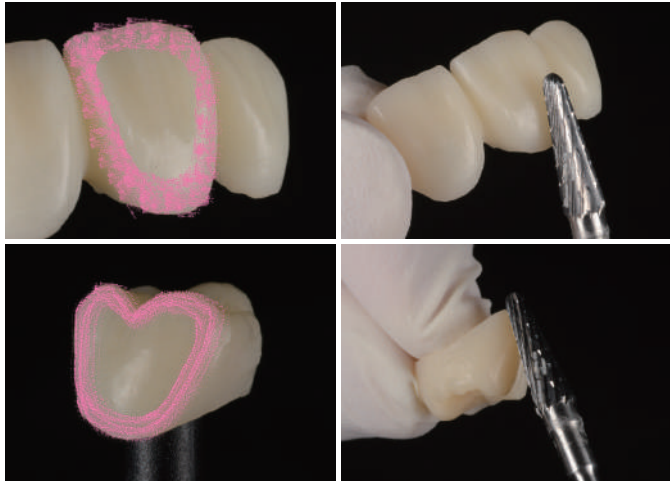


- レジン圧接後のバリ・余剰分の削合
- 概形の形成
- スーブラジンジバルカントウアの調整

**カントウアガイドラインの調整：**  
 歯肉と歯冠の中央基準線が一致することを基準に歯冠の豊隆を考える事で、清掃性・自浄性が向上します。



H79E-040


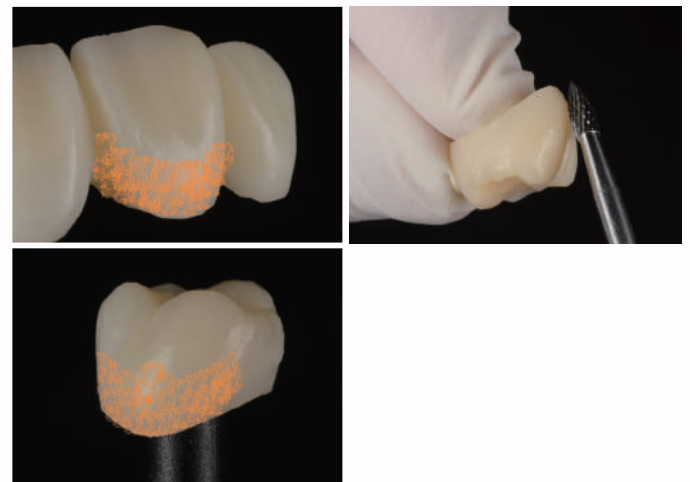


- サブジンジバルカントウアの調整

豊隆は歯種によって異なる形状を持ち、インプラント補綴の場合、埋入ポジションや考え方の違いで形態は変化します。それらを適正に形態付与することが歯周組織との調和や自浄性・清掃性の向上に繋がると考えられます。



H78E-023

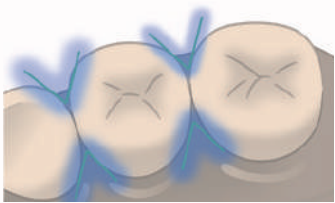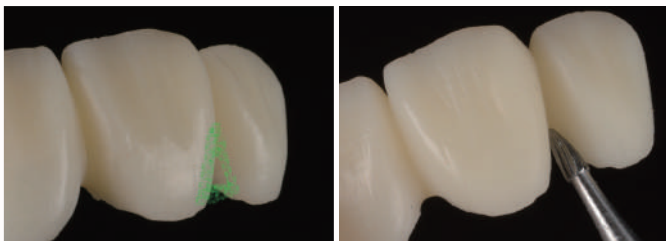


- 鼓形空隙の調整（上部・下部・舌側・頬側）

コンタクトポイントに対して対称かつ適正に付与することで部分的な凸凹が少なくなり、均等に清掃器具が届き清掃性の向上に繋がります。



H390-016

- 咬合面形態の付与

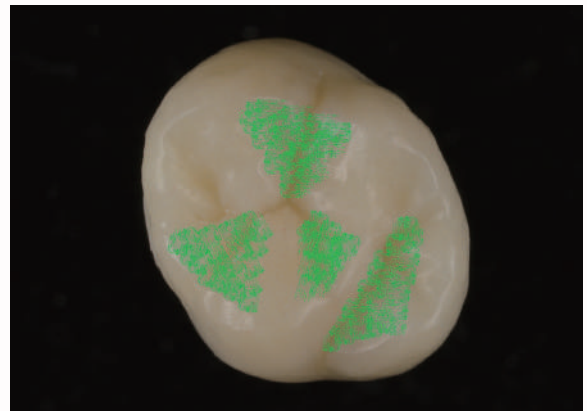


# 製品詳細

# 研磨用製品 HP

## レジン・石膏・メタルの切削用 (E タイプ)

適応：レジン、石膏、プレシャスメタル、ノンプレシャスメタル（※チタンを除く）  
 特長：クロスカットブレードでノーマルタイプよりも高い切れ味です  
 適正回転数：15,000rpm（レジン・石膏・ノンプレシャスメタル）25,000rpm（プレシャスメタル）

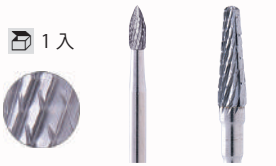

品番	H78E-023	H79E-040
作業長	6.0	13.0
価格	4,000円	5,400円

## 咬合面・裂溝仕上げ用 (HP ハードメタルバー)

適応：プレシャスメタル、ノンプレシャスメタル（※チタンを除く）、  
 陶材（※ジルコニア・ニケイ酸リチウムを除く）、レジン  
 特長：先端のラウンドとサイドのフィッシャー形状で曲線と面の付与を  
 1本で行えます  
 適正回転数：20,000rpm



品番	H390-016
作業長	3.5
価格	9,600円

## 咬合調整用 (UM タイプ)

適応：レジン、プレシャスメタル、ノンプレシャスメタル  
 （※チタンを除く）  
 特長：3方向から付与したブレードで高い切削力と  
 滑らかな切削面が得られます  
 適正回転数：15,000rpm（レジン・ノンプレシャスメタル）  
 25,000rpm（プレシャスメタル）



品番	H77UM-023
作業長	5.0
価格	4,000円

## アクリルポリッシャー NEW

適用：  
 ・スプリントディスク  
 ・ナイトガードディスク  
 ・アクリル系リベース  
 ・即時重合レジン  
 ・義歯床用アクリルレジン（重合型熱可塑性）




品番	9489C (コア)	9489M (ミディアム)
作業長	25.0	
最大径	10.0	
最高回転数	10,000	
価格	6,600円	

推奨回転数：毎分6,000回転


コメント アブラシブポイント  
 届出番号：27B2X00091000010  
 一般医療機器 歯科用研磨器材

## ●中心窩・主溝の付与

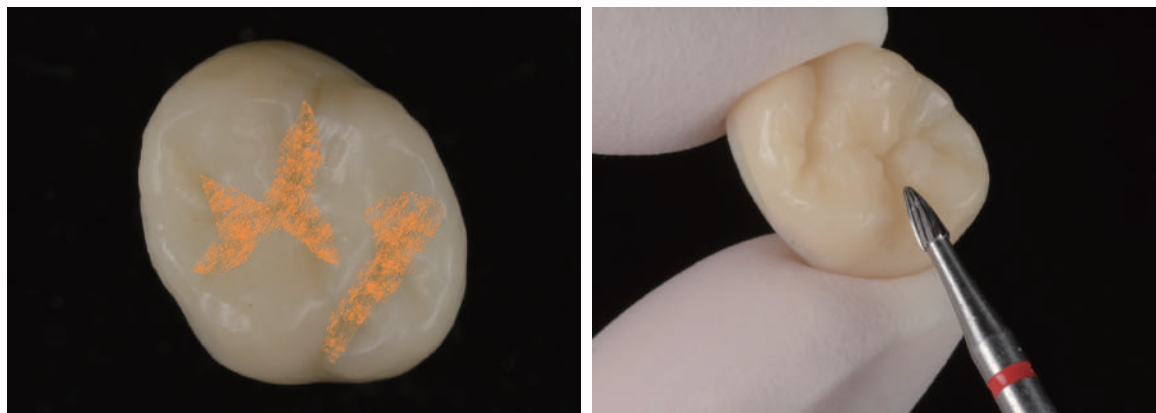

H78E-023、H390-016 との併用で線形態を崩すことなく滑らかなカービングができます。

- 隆線、嵌合咬頭の賦形
- V字溝、咬合傾斜面の賦形

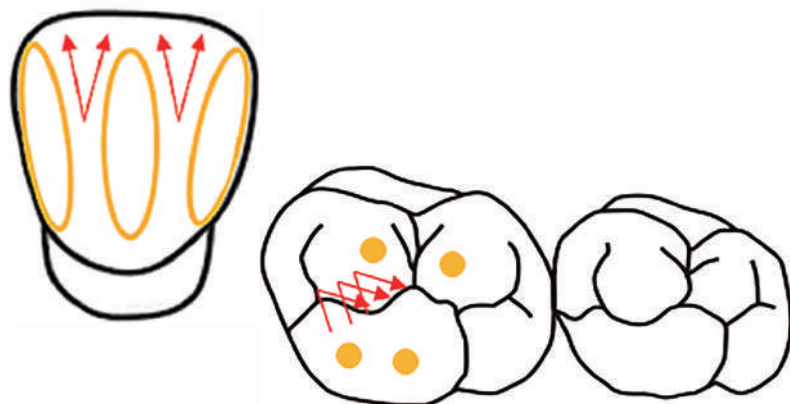

製造販売元  
**株式会社モモセ歯科商会**

本社・大阪営業所  
 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6-35  
**TEL 06-6773-3333** (代)

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2  
**TEL 03-3835-2653** (代)  
 九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21  
**TEL 092-575-6060** (代)

<http://www.momose-dm.co.jp/> モモセ歯科商会





コメット 技工キャンペーン  
チェアサイド向け

# LOVE

# THE JOB!

# 2023

5/22~10/20

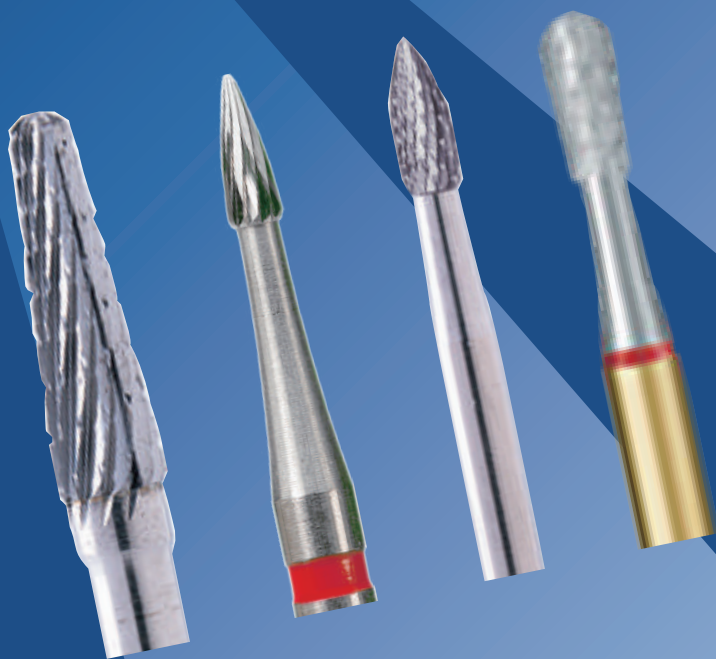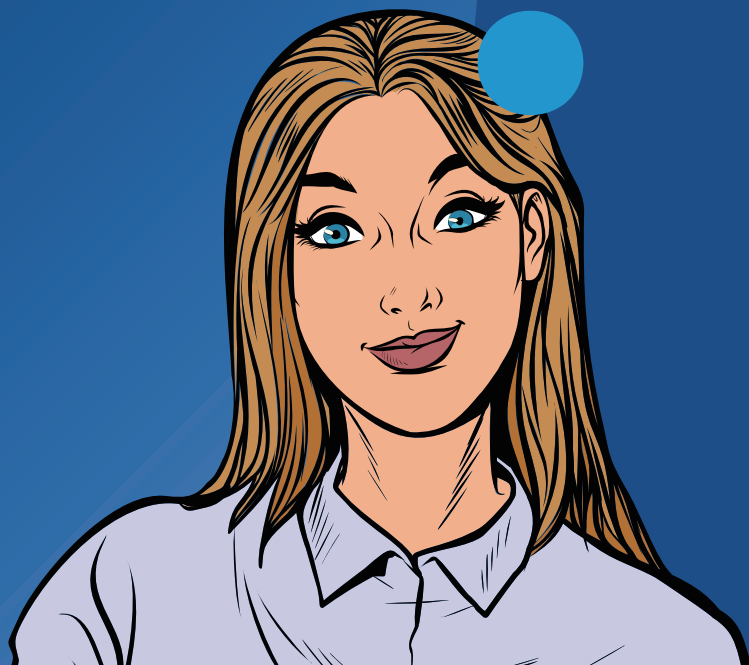

# 100

years  
of preparation  
for tomorrow



Quality Products  
Made in Germany

